


Skötsel & rengöring av bakom-örat-apparat med gjuten insats

För att din hörapparat ska fungera optimalt behöver du rengöra din insats (snäckan/proppen) regelbundet. Nedan följer instruktioner om hur rengöringen bör göras.

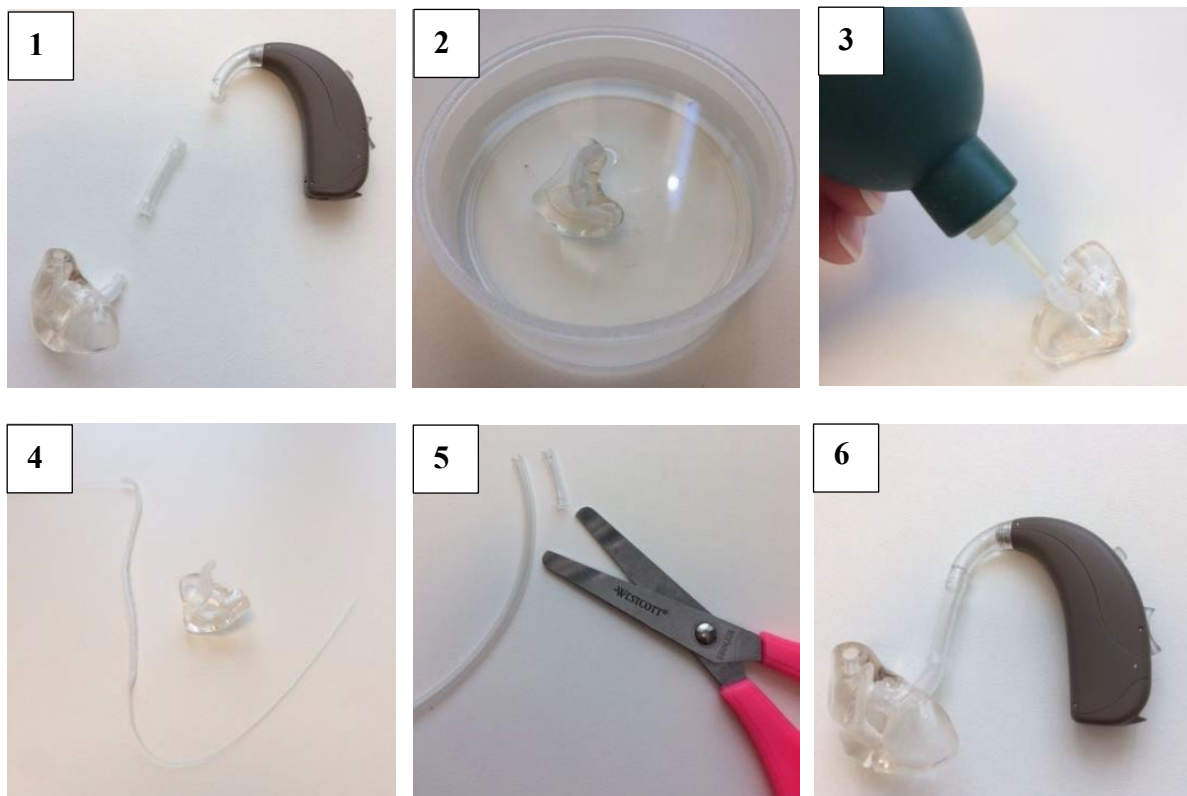

1-2: Lossa insatsen och lägg i en skål med vatten och lite diskmedel/tvål. Låt ligga i minst 30 minuter, gärna över natten. Skölj sedan insatsen noga under rinnande vatten.

3-4: Blås ut eventuellt vatten som kan ha samlats i insatsens ljudkanal, det går även bra att använda en mellanrumstandborste eller tjockare tandtråd.

5: Vid behov av slangbyte, mät på den gamla slangen och klipp till en ny av samma längd. Slangen bör bytas ca 1 gång/månad. Ny plastslang får du hos din audionom eller hos kommunens syn-och hörselinstruktör.

6: Sätt ihop insatsen med hörapparaten. Skulle hörapparaten mot förmodan vara tyst efter detta, gör en extra kontroll så att inget vatten finns kvar i slang eller insats.

OBS! Hörapparaten ska aldrig vara i kontakt med vatten! Skulle det komma vatten i hörapparaten gör enligt följande: öppna batterifacket, ta ur batteriet och låt apparaten torka ut ordentligt. Har du tillgång till fuktkapslar så använd dessa.